

SAMSUNG Ultraschallsystem HS40

Klein und oho



SAMSUNG


Außergewöhnliche Bildqualität

Mit den erstaunlich detaillierten und verbesserten Bildinformationen, die mit den fortschrittlichen Imaging-Technologien von Samsung erreicht werden, können Sie voller Vertrauen Ihre klinischen Entscheidungen treffen.




ClearVision™

Die hochentwickelte ClearVision™-Technologie reduziert Speckle-Rauschen, optimiert die Kantendarstellung und verbessert die Kontrastauflösung für scharfe und natürliche Bildergebnisse. Ein weiterer Vorteil liegt in der anwendungsspezifischen Bildoptimierung.

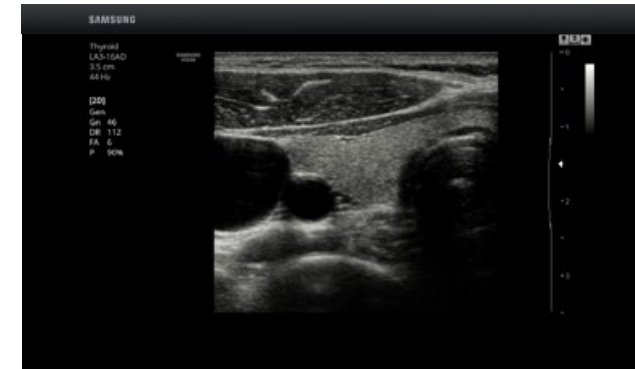


Schilddrüse ohne ClearVision™

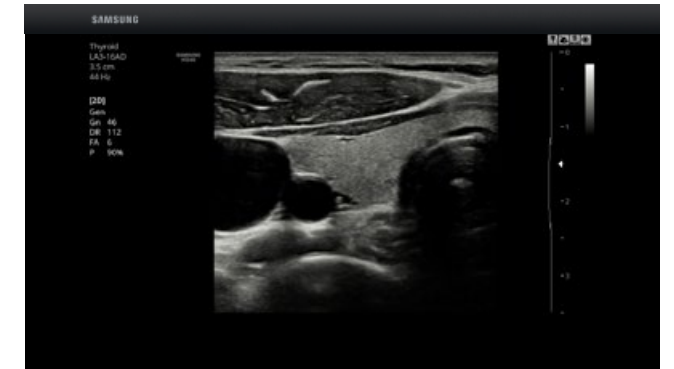


Schilddrüse mit ClearVision™

MultiVision

Durch elektronisches Beamsteering und die Nutzung vieler Scanlinien erzeugt MultiVision Ultraschallbilder von erstaunlich hoher Qualität. MultiVision bietet Ihnen eine bemerkenswerte räumliche und kontrastreiche Auflösung bei gleichzeitiger Unterdrückung bestehender Artefakte.

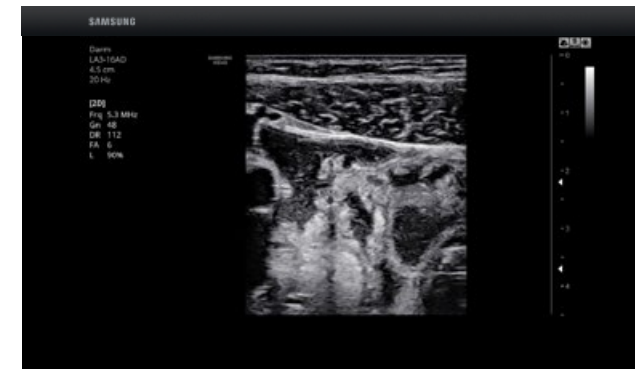

Darm ohne MultiVision

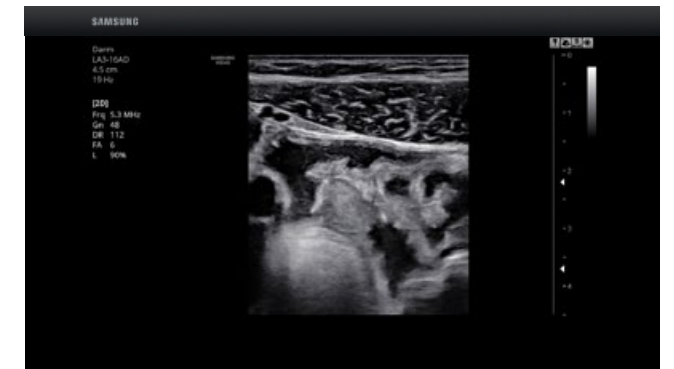

Darm mit MultiVision

S-Harmonic™

Die neue S-Harmonic™-Technologie ermöglicht brillante Bilder sowohl im oberflächennahen Bereich als auch in der Tiefe. Sie minimiert Rauschen und sorgt so für homogene Ultraschallbilder. S-Harmonic™, MultiVision und ClearVision™ bieten Ihnen Bildqualität auf hohem Niveau.



Fetales Abdomen ohne S-Harmonic™



Fetales Abdomen mit S-Harmonic™


Fortschrittliche Tools für optimierte Patientenversorgung

Verbessern Sie Ihre allgemeinmedizinischen und internistischen Ultraschalluntersuchungen mit den vielfältigen Features der HS40 für eine effiziente und effektive Versorgung Ihrer Patienten.



Needle Mate™


Den richtigen Untersuchungsbereich zu finden, ist in der diagnostischen Bildgebung maßgeblich für Ihre Diagnose. Die hochpräzise Nadelführungstechnologie ermöglicht Ihnen die exakte Platzierung der Nadel und optimiert so Ihre Ultraschallbiopsien sowie lokalen Anästhesien.

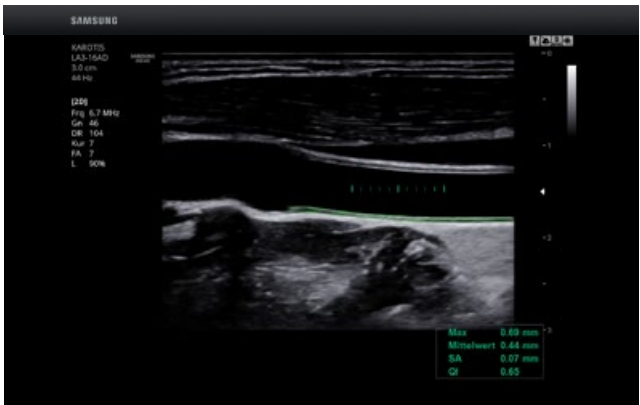

AutoIMT+™

AutoIMT+™

AutoIMT+™ ermöglicht Ihnen die automatische Messung der Intima-Dicke der Arteria Carotis Communis für die Analyse von Schlaganfall- und Herzinfarktrisiken. Die einfache Bedienung hilft Ihnen, Ihren Workflow sowie auch Ihren Patientendurchsatz zu erhöhen.

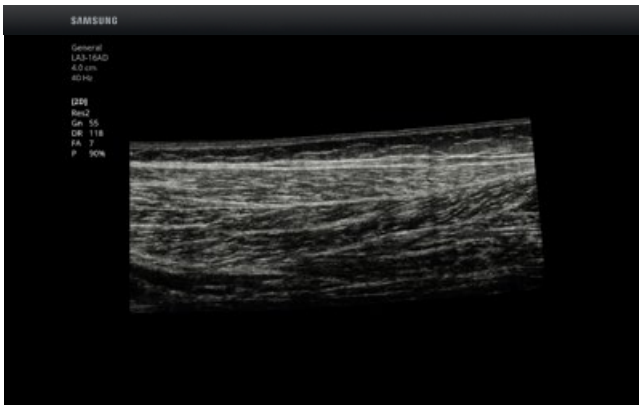

Panoramic

Panoramic

Dank Panoramic können Sie in einer erweiterten Bildansicht einen größeren Untersuchungsbereich darstellen.

Erweiterte Imaging-Funktionen

Die fortschrittlichen Tools von Samsung optimieren Ihre geburtshilflichen und gynäkologischen Untersuchungen, für eine effiziente und effektive Versorgung Ihrer Patientinnen.



5D NT™

Die HS40 bietet Ihnen die innovative 5D-NT™-Technologie. Innerhalb eines erfassten Volumens wird hiermit automatisch die mitsagittale 3D-Schnittebene des fetalen Kopfbereiches erkannt und auf das passende Format vergrößert. Ein zweiter Schritt ermöglicht die leichte Messung der fetalen Nackentransparenz.



Fetales Gehirn in Multi-Slice View

3D XI

Mit einer Reihe von herausragenden Imaging-Anwendungen (Multi-Slice View, Oblique View und Volume CT) bietet 3D XI Ihnen eine präzise Steuerung Ihrer 3D/4D-Volumen-Daten-sätze und verbessert so Ihre Diagnosegenauigkeit.



Hello Mom*

Hello Mom ist eine Anwendung für Android- und iOS-Smart-phones, die es ermöglicht, fetale Ultraschallbilder und Filme einfach, schnell und drahtlos von der HS40 auf das Smart-phone zu übertragen. So können werdende Mütter und Väter diese Bilder und Filme mit Freunden und Verwandten teilen und das Wachsen des Feten verfolgen.

* Hello Mom ist keine diagnostische Anwendung.

  Für Android / iOS

Überzeugende Bildqualität



Pankreas




Nierenperfusion mit Powerdoppler




Niere mit PW-Doppler




Dualbild mit Gallenblase im Zoom

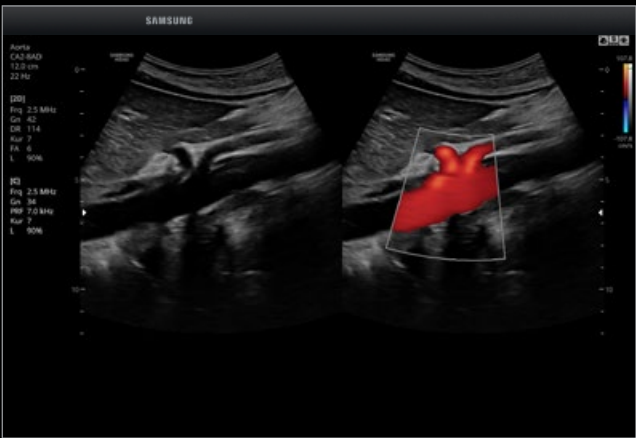


Truncus coeliacus im Dualbild

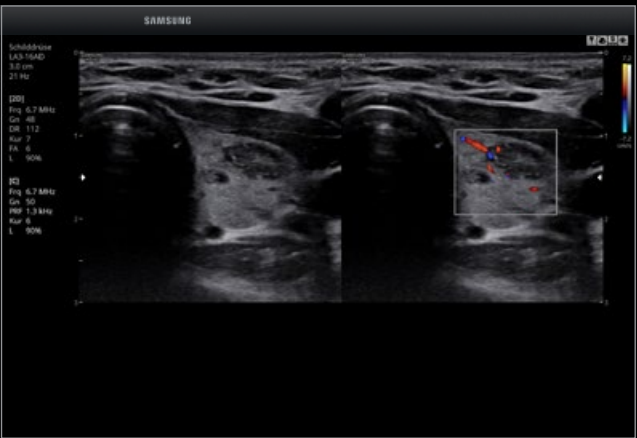


Schilddrüsenknoten im Dualbild

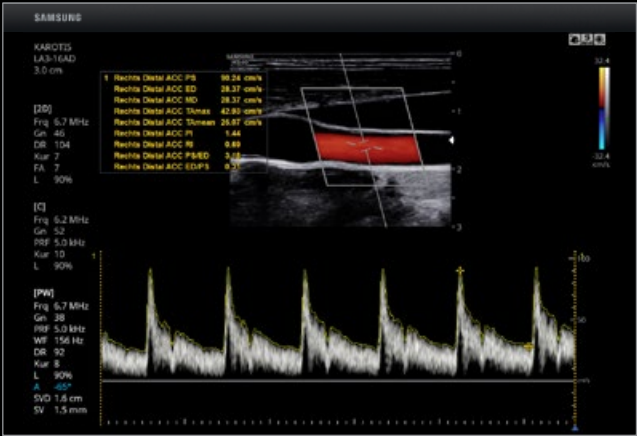


Carotis mit PW-Doppler

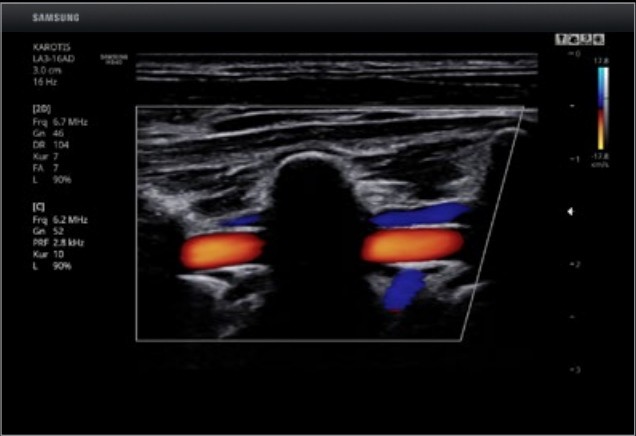


A. vertebralis mit Farbe

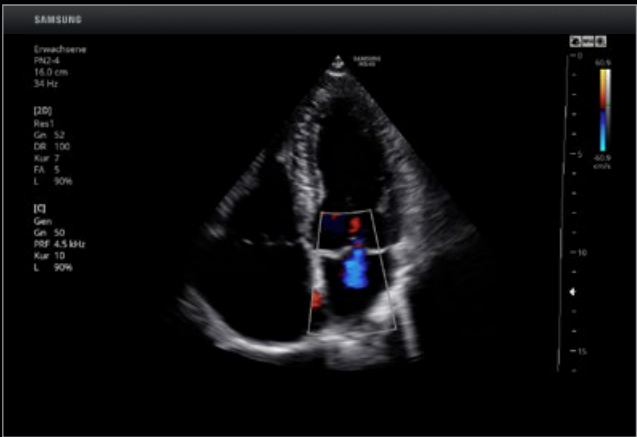


Mitralklappenregurgitation

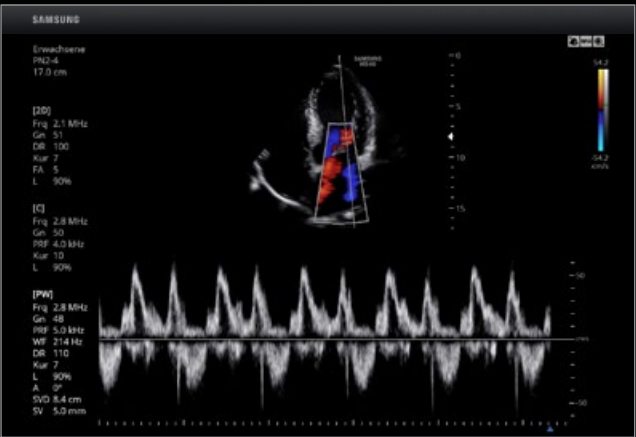

Mitralklappeneinstrom mit PW-Doppler

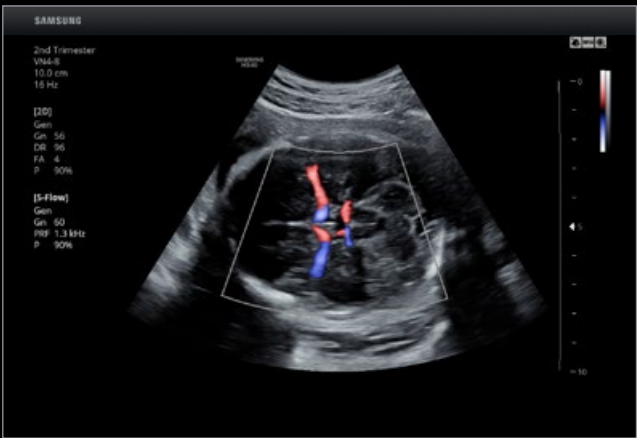

Circulus willisii mit S-Flow™

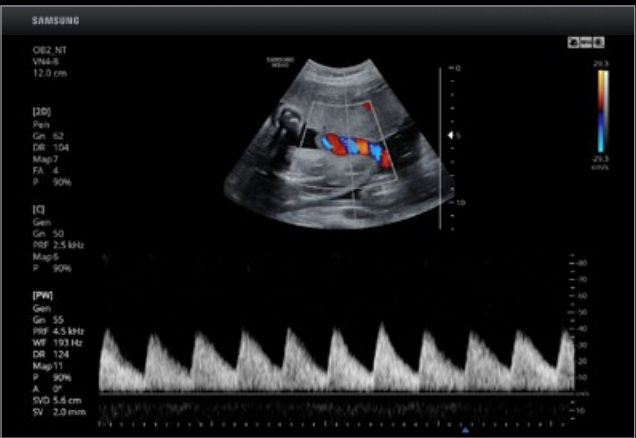

Umbilical Arterien mit PW-Doppler

Benutzerorientierte Features für optimierten Workflow



Quick Preset


Mit nur einem Klick können Sie als Nutzer Ihre häufig verwendete Schallkopf-Preset-Kombination anwählen. Quick Preset maximiert so Ihre Effizienz und beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe.

CA2-8AD Abdomen

LA3-16AD Schilddrüse

PN2-4 Kardio

CF4-9 Päd. Abdomen

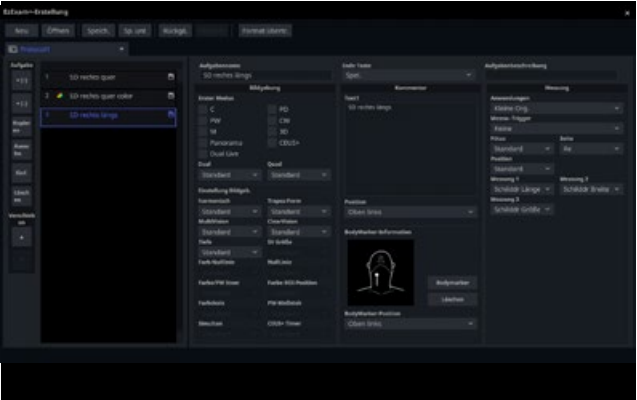

EZ-Exam+™ Set-up-Menü

EZ-Exam+™

EZ-Exam+™ ermöglicht Ihnen die Nutzung vordefinierter oder bereits erstellter Untersuchungs-Protokolle. Ihre Ultraschalluntersuchung wird so zu einem durchgängigen Prozess zusammengefasst, welcher stringent durchgeführt wird.

Modernes Design für hohen Bedienkomfort

21,5"-Full-HD-LED-Monitor

Mit ihrem 21,5"-LED-Monitor in Full-HD-Qualität bietet die HS40 ein großes Ultraschallbild mit beeindruckendem Kontrast, enormer Klarheit und Schärfe sowie brillanten Farben – auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

10,1"-Touchscreen

Das 10,1"-Touchscreen erlaubt Ihnen, dank seiner hohen Sensitivität, eine einfache und intuitive Bedienung.

Individuelle Höheneinstellung

Die leichtgängige Höhenverstellbarkeit ermöglicht Ihnen, das System ohne Anstrengung auf Ihre gewünschte Höhe einzustellen.



Geräuscharmer Betrieb

Die HS40 besticht durch Ihren leisen Betrieb, so dass Sie Ihre Untersuchungen, einschließlich Auskultation, während des laufenden Betriebes, ohne Störung durchführen können.

Schutzabdeckung

Schützen Sie Ihre nicht genutzten Schallkopfanschlüsse vor Staub mit den dafür vorgesehenen Schutzabdeckungen.



Vollbeweglicher Monitor-Gelenkarm

Dank des Gelenkarmes lässt sich die Monitorposition unkompliziert an Ihre wechselnden Bedürfnisse anpassen.



Heckablage

Im hinteren Bereich bietet Ihnen die HS40 bei Bedarf zusätzliche Ablagemöglichkeiten.



Halterung für Endokavitärsonde

Die HS40 verfügt über eine seitlich montierte Halterung, in der Sie bequem Ihre Sonde ablegen können.



Gelwärmer

Ein zweistufig einstellbarer Gelwärmer hält das Ultraschallgel auf einer angenehmen Temperatur.



Druckerabdeckung

Diese benutzerfreundliche Abdeckung, schützt Ihren Drucker vor eventuellen Beschädigungen.



Seitentasche

Die seitlich montierte Tasche ermöglicht Ihnen die Aufbewahrung Ihres Tablet-PCs sowie weiterer Unterlagen.

Sondenportfolio

Convex-Sonden



CA2-8AD

Applikationen: Abdomen,
Gynäkologie/Geburtshilfe
Winkel: 58°



CF4-9

Applikationen: Pädiatrie,
Vaskulär
Winkel: 92°

Linear-Sonde



LA3-16AD

Applikationen: Small Parts,
Vaskulär, MSK
Bildfeld: 38 mm

Phased-Array-Sonde



PN2-4

Applikationen: Abdomen,
Kardiologie, Vaskulär
Winkel: 90°

Endokavitär-Sonde



EVN4-9

Applikationen: Urologie,
Gynäkologie/Geburtshilfe
Winkel: 148°

Volumen-Sonden



VN4-8

Applikationen: Abdomen,
Gynäkologie/Geburtshilfe
Winkel: 77°



V5-9

Applikationen: Urologie,
Gynäkologie/Geburtshilfe
Winkel: 150°

CW-Stift-Sonde



DP2B

Applikationen: Kardiologie

Rechtliche und weiterführende Informationen

Mehr Informationen über Samsung HME-Produkte finden Sie unter www.samsung.de/HME.

Samsung Electronics GmbH
HME-Division
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.

Kundenservice
Telefon: 06196 66 53 81
Fax: 06196 66 53 77
E-Mail: HME@samsung.de

Technischer Service
Hotline: 06196 93 40 246*
Fax: 06196 66 53 99
E-Mail: service-hme@samsung.de

* Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetz- oder Mobilfunkanschlüsse.

Stand Juni 2017. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.



SAMSUNG