



Clover60-Vet

Highend tragbares Ultraschallgerät

Kompakt. Präzise. Leistungsfähig.

endocon[®]
vet

Kompakt. Präzise. Leistungsfähig.

Clover60-Vet verfügt über ein robustes, kompaktes Gehäuse und einen smarten Gerätewagen. Damit ist es mobil einsetzbar und wird zu einem individuellen Begleiter für ihre anspruchsvollsten Untersuchungen und Interventionen vor Ort und unterwegs.



15" HD LCD Monitor 



Clover60-Vet ist mit 
4,9 kg leicht und dennoch robust

Diebstahlsicherung 

Akkubetrieb bis zu 90 Minuten

Stabiles Magnesiumgehäuse

Zubehör



Kompakter Trolley
für den sicheren Transport



WiFi & 3G
Schnellsuche und belegbare Taste



Große Räder 
Transportrollen



2 Schallkopfanschlüsse am Gerät selbst

Alles perfekt aufgeräumt



Höhenverstellbar



Vielseitig anwendbar, beste Bildqualität

Eine breite Auswahl an Ultraschall-Sonden deckt alle allgemeinen Anwendungen ab. Ein innovatives Mittellinien-Design sowie die Möglichkeit, im Nahbereich auf bis zu 1 cm Eindringtiefe zu gehen, bieten dem Anwender höchstmögliche Genauigkeit und eine detailreiche Darstellung.



Unschlagbares 15" System mit nur 4,9 kg Gesamtgewicht inklusive Akku und 2 Schallkopfanschlüssen.

Clover60-Vet ist stets bereit für jede kritische Situation, da die Startzeit unglaubliche 5 Sekunden (sleep reboot) und nur 23 Sekunden (hard reboot) beträgt. Somit ist es das am schnellsten bootende System auf dem Markt. Perfekt für jeden anspruchsvollen Einsatz.

Anwendungsbereiche:

- **Kleintiere:** Abdomen, Kardiologie, Orthopädie, Gynäkologie
- **Großtiere und Pferde:** Abdomen, Orthopädie, Gynäkologie

Einstellhilfen für optimales Arbeiten:

- Einstellbare, optimierte Bildauflösung
- Übersichtliches Fall-M Behandlungsmanagement
- Verbessertes Pre- und Post Processing
- Bildvergrößerung ohne Qualitätsverlust
- Auto Doppler: automatische Bildparameteranpassung

Besonderheiten:


- Spezielle Vet Software (Bodymarks, Trächtigkeitsuntersuchung)
- Exzellente Bildqualität. Clover60-Vet baut auf der Holo-Plattform auf, welche 64-beam

processing mit bis zu 5000 Bildern pro Sekunde verarbeiten kann


- Einkristall-Technologie für brillante Kardiobilder
- Lange Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten für mobile Einsätze
- Extrem schnell: Bootzeit aus Standby Modus beträgt nur 5 Sekunden
- 2 Schallkopfanschlüsse am Gerät selbst

Technische Daten


- Bildmodi: B, B+B, B+M, M, CDI, B+CDI, PW, CW
- Doppler: Farb-, PW, CW Doppler
- EKG-Modul
- Interner Speicher 240 GB
- Bildexport in Windowsformate
- Abmessungen: B 35 x H 6,5 x T 37 cm
- Gewicht: 4,9 kg

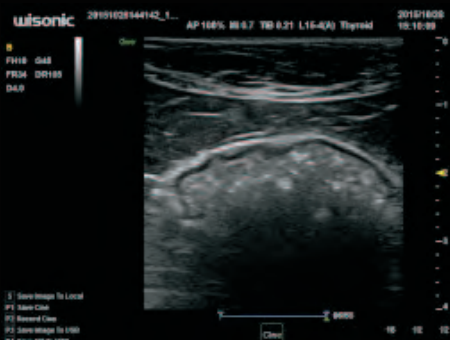


Katzengallen

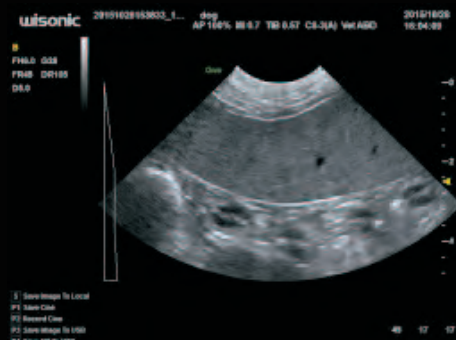

Hundemilz

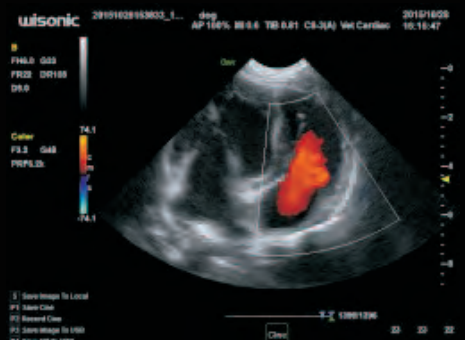

Hundeherz

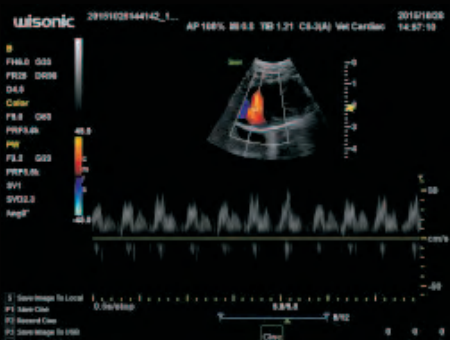

Katzengerz



Katzengallen



Katzendarm

Vielseitig anwendbar, beste Bildqualität: die Sonden

C5-1



Bandwidth: 1.55-5.77MHz
FOV (Max): 54° ExFOV: 70°
Biopsy Guide: JSM-050, 20°, 30°, 40°

C7-2



Bandwidth: 2.9-6MHz
ExFOV: 80°
Biopsy Guide: Not available

C8-3



Bandwidth: 3.45-9.75MHz
FOV (Max): 92° ExFOV: 112°
Biopsy Guide: Not available

D7-2



Bandwidth: 2.9-6.1MHz
FOV (Max): 84°*70°(sweep)
Biopsy Guide: Not available

EV10-4



Bandwidth: 3.45-9.75MHz
FOV (Max): 150° ExFOV: 169°
Biopsy Guide: JSM-028, Single Angle

L15-4



Bandwidth: 3.1-13 MHz
FOV (Max): 38mm
Steer: +/-30°, 1°/increment
Biopsy Guide: JSM-041, 37°, 46°, 58°

L10-5



Bandwidth: 3.45-11.85MHz
FOV (Max): 38mm
Steer: +/-30°, 1°/increment
Biopsy Guide: JSM-032, 27°, 38°, 52°

L20-10



Bandwidth: 8.1-25.5MHz
FOV (Max): 12.8mm
Steer: +/-30°, 1°/increment
Biopsy Guide: Not available

L12-5



Bandwidth: 3.45-11.85MHz
FOV (Max): 38mm
Steer: +/-30°, 1°/increment
Biopsy Guide: JSM-032, 27°, 38°, 52°

LH15-6



Bandwidth: 4.2-14.54MHz
FOV (Max): 26mm
Steer: +/-30°, 1°/increment
Biopsy Guide: Not Available

P4-1



Bandwidth: 1.45-4.75MHz
FOV (Max): 90°
Biopsy Guide: JSM-020, 13°, 24°

P7-3



Bandwidth: 2.35-7.05MHz
FOV (Max): 90°
Biopsy Guide: Not Available

L9-4V



Bandwidth: 4-9 MHz
FOV (Max): 64mm
Biopsy Guide: Not available



Hersteller:
wisonic

Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd.

Vertrieb Deutschland:

endocon GmbH

In der Au 5

T +49 6223 7390 10

E info@endocon-vet.de

Bestellhotline (telefonisch)

- 69257 Wiesenbach
- F +49 6223 7390 199
- I www.endocon-vet.de
- +49 6223 7390 **112**